



- 棒状のステッキは、ステッキなしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう、補助的に使用するものです。体重を掛け過ぎると、かえって肩や手を痛めることもある為、次の場合は使用に適しません。
(また、次のような状態になった場合は使用を中止してください。)
- ①ステッキなしでは歩行できない方の使用
(手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。)
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。(ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。)

サイズ：
約66.5cm～89.0cm伸縮

取扱説明書

品番：WB3757
 商品名：アクティブグレース伸縮Sブラック
 サイズ：約66.5cm～89.0cm伸縮
 10段階調節2.5cmピッチ
 材質：グリップ/ポリプロピレン、
 エラストマー
 シャフト/アルミニウム
 ストラップ/ナイロン
 先ゴム/合成ゴム
 重量：約250g
 使用先ゴム：16mm用
 生産国：台湾

S Gマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

- !** この度は、当社商品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
! ご注意 ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法を理解された上で正しく使用してください。
 ●お読みになった後はいつでもご覧頂けるように商品タグと一緒に大切に保管してください。


ステッキの長さ調節の目安

ステッキの長さ調節

ステッキの先をつま先から20cm前方に置いて、ひじを140～150度に曲げた時が最適な高さです。

ステッキの長さの目安

(身長÷2)+3cm
 端数は切り上げ
 【例】
 身長が160cmなら、
 83cmとなります。

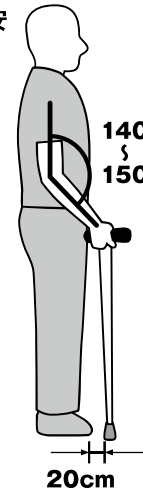


長さ調節方法

1. シャフトロックを回してゆるめてください。
2. ストッパーを押しながらシャフトをスライドさせ、長さを調節します。
3. シャフトをスライドする場合、上部シャフトから下部シャフトが抜けないようにしてください。

! ご注意 シャフトロック内の樹脂部品(オリング)が外れると、確実に固定できない場合があります。


4. 長さを調節後、ストッパーがサイズ調節穴に確実に入っていることを確認してください。
5. シャフトロックを回して締め確実に固定してください。

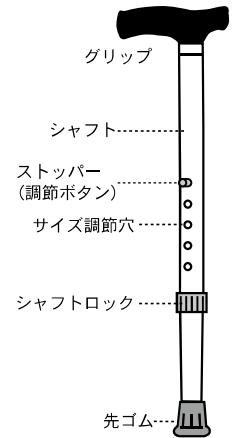

●安全上のご注意・・・ステッキ本来の使い方をしてください！

1. 長さ調節方法をよくお読みになり、正しく理解した上でご使用ください。
2. 身体に合った長さに調節してご使用ください。不適切な長さで使用すると事故などの原因となり、危険です。
また、シャフトが確実に固定されたことを確認してご使用ください。
3. ご使用前には必ず各部の点検をしてください。万一、本体のキズ、先ゴムの異常などを見つけた時は、ご使用をおやめください。
4. 使用後は、シャフトの水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させてください。
(そのまま放置すると内側が錆びやすくなります)。
5. 使用後は屋内に保管してください。その際、高温・多湿の場所には置かないでください。
6. 柔らかな地面や、雪道、滑りやすい所では使用しないでください。また段差にもご注意ください。
7. 道路の側溝の溝や凹みがある所では、つえ先がはまり込む場合がありますので、充分ご注意ください。
8. グリップ先端に過大な力をかけるような使い方はしないでください。
9. 用途以外(例えば、登山用、護身用等)には使用しないでください。
10. 先ゴムが摩耗したり、破れた場合は速やかに取り替えてください。取り替えの際は、シャフトの先端が完全にゴムの中に入るまで、確実に挿入してください。中途半端な取り付けは危険です。

グリップの握り方

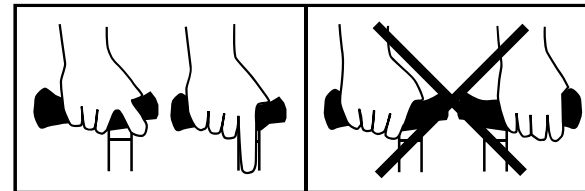

! ご注意 ご使用前に、シャフトのサイズ調節穴からストッパー(調節ボタン)が確実に出ていている事をご確認下さい。

発売元 **フジホーム株式会社**

〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15
 ヒューリック八丁堀ビル7F
 TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632
 URL:www.fujihome.co.jp





- 棒状のステッキは、ステッキなしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう、補助的に使用するものです。体重を掛け過ぎると、かえって肩や手を痛めることもある為、次の場合は使用に適しません。
(また、次のような状態になった場合は使用を中止してください。)
- ①ステッキなしでは歩行できない方の使用
(手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。)
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。(ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。)

サイズ：
約66.5cm～89.0cm伸縮

取扱説明書

品番：WB3756
 商品名：アクティブグレース伸縮Sワインレッド
 サイズ：約66.5cm～89.0cm伸縮
 10段階調節2.5cmピッチ
 材質：グリップ/ポリプロピレン、
 エラストマー
 シャフト/アルミニウム
 ストラップ/ナイロン
 先ゴム/合成ゴム
 重量：約250g
 使用先ゴム：16mm用
 生産国：台湾

S Gマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

- !** この度は、当社商品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
! ご注意 ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法を理解された上で正しく使用してください。
 ●お読みになった後はいつでもご覧頂けるように商品タグと一緒に大切に保管してください。


ステッキの長さ調節の目安

ステッキの長さ調節

ステッキの先をつま先から20cm前方に置いて、ひじを140～150度に曲げた時が最適な高さです。

ステッキの長さの目安

(身長÷2)+3cm
 端数は切り上げ
 【例】
 身長が160cmなら、
 83cmとなります。

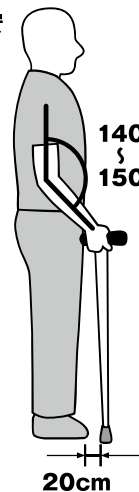


長さ調節方法

1. シャフトロックを回してゆるめてください。
2. ストッパーを押しながらシャフトをスライドさせ、長さを調節します。
3. シャフトをスライドする場合、上部シャフトから下部シャフトが抜けないようにしてください。

! ご注意 シャフトロック内の樹脂部品(オリング)が外れると、確実に固定できない場合があります。


4. 長さを調節後、ストッパーがサイズ調節穴に確実に入っていることを確認してください。
5. シャフトロックを回して締め、確実に固定してください。

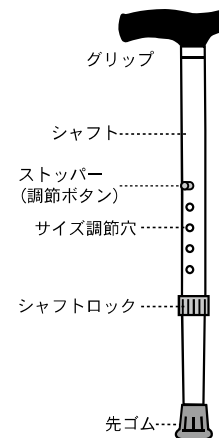

●安全上のご注意・・・ステッキ本来の使い方をしてください！

1. 長さ調節方法をよくお読みになり、正しく理解した上でご使用ください。
2. 身体に合った長さに調節してご使用ください。不適切な長さで使用すると事故などの原因となり、危険です。
また、シャフトが確実に固定されたことを確認してご使用ください。
3. ご使用前には必ず各部の点検をしてください。万一、本体のキズ、先ゴムの異常などを見つけた時は、ご使用をおやめください。
4. 使用後は、シャフトの水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させてください。
(そのまま放置すると内側が錆びやすくなります)。
5. 使用後は屋内に保管してください。その際、高温・多湿の場所には置かないでください。
6. 柔らかな地面や、雪道、滑りやすい所では使用しないでください。また段差にもご注意ください。
7. 道路の側溝の溝や凹みがある所では、つえ先がはまり込む場合がありますので、充分ご注意ください。
8. グリップ先端に過大な力をかけるような使い方はしないでください。
9. 用途以外(例えば、登山用、護身用等)には使用しないでください。
10. 先ゴムが摩耗したり、破れた場合は速やかに取り替えてください。取り替えの際は、シャフトの先端が完全にゴムの中に入るまで、確実に挿入してください。中途半端な取り付けは危険です。

グリップの握り方

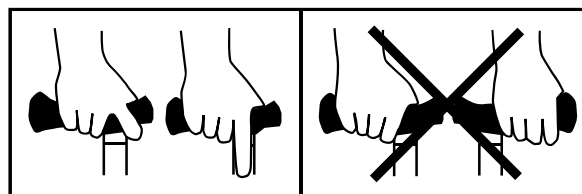

! ご注意 ご使用前に、シャフトのサイズ調節穴からストッパー(調節ボタン)が確実に
 出ている事をご確認下さい。

発売元 **フジホーム株式会社**

〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15
 ヒューリック八丁堀ビル7F
 TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632
 URL:www.fujihome.co.jp





- 棒状のステッキは、ステッキなしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう、補助的に使用するものです。体重を掛け過ぎると、かえって肩や手を痛めることもある為、次の場合は使用に適しません。(また、次のような状態になった場合は使用を中止してください。)
- ①ステッキなしでは歩行できない方の使用(手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。)
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。(ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。)

サイズ：
約66.5cm～89.0cm伸縮

取扱説明書

品番：WB3751
 商品名：アクティブグレース伸縮S桜パープル
 サイズ：約66.5cm～89.0cm伸縮
 10段階調節2.5cmピッチ
 材質：グリップ/ポリプロピレン、
 エラストマー
 シャフト/アルミニウム
 ストラップ/ナイロン
 先ゴム/合成ゴム
 重量：約250g
 使用先ゴム：16mm用
 生産国：台湾

S Gマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

- !** この度は、当社商品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
 ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法を理解された上で正しく使用してください。
 ●お読みにになった後はいつでもご覧頂けるように商品タグと一緒に大切に保管してください。



●安全上のご注意・・・ステッキ本来の使い方をしてください！

- 長さ調節方法をよくお読みになり、正しく理解した上でご使用ください。
- 身体に合った長さに調節してご使用ください。不適切な長さで使用すると事故などの原因となり、危険です。
また、シャフトが確実に固定されたことを確認してご使用ください。
- ご使用前には必ず各部の点検をしてください。万一、本体のキズ、先ゴムの異常などを見つけた時は、ご使用をおやめください。
- 使用後は、シャフトの水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させてください。(そのまま放置すると内側が錆びやすくなります)。
- 使用後は屋内に保管してください。その際、高温・多湿の場所には置かないでください。
- 柔らかな地面や、雪道、滑りやすい所では使用しないでください。また段差にもご注意ください。
- 道路の側溝の溝や凹みがある所では、つえ先がはまり込む場合がありますので、充分ご注意ください。
- グリップ先端に過大な力をかけるような使い方はしないでください。
- 用途以外(例えば、登山用、護身用等)には使用しないでください。
- 先ゴムが摩耗したり、破れた場合は速やかに取り替えてください。取り替えの際は、シャフトの先端が完全にゴムの中に入るまで、確実に挿入してください。中途半端な取り付けは危険です。
- 万が一ステッキを斜めに突いても、先ゴムが床面に接地する為、滑りにくくなっております。


ステッキの長さ調節の目安

ステッキの長さ調節

ステッキの先をつま先から20cm前方に置いて、ひじを140～150度に曲げた時が最適な高さです。

ステッキの長さの目安

(身長÷2)+3cm
 端数は切り上げ
 【例】
 身長が160cmなら、
 83cmとなります。

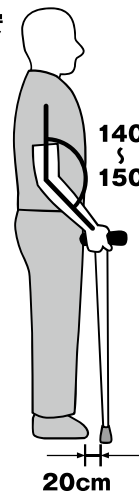


長さ調節方法


- シャフトロックを回してゆるめてください。
- ストッパーを押しながらシャフトをスライドさせ、長さを調節します。
- シャフトをスライドする場合、上部シャフトから下部シャフトが抜けないようにしてください。

! シャフトロック内の樹脂部品(オリング)が外れると、確実に固定できない場合があります。

- 長さを調節後、ストッパーがサイズ調節穴に確実に入っていることを確認してください。
- シャフトロックを回して締め、確実に固定してください。

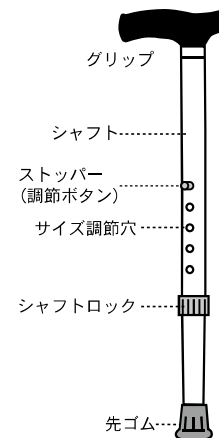

グリップの握り方

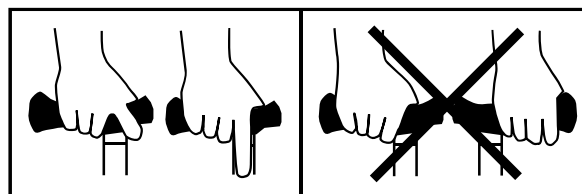

ご使用前に、シャフトのサイズ調節穴からストッパー(調節ボタン)が確実に

出ている事をご確認下さい。

発売元 **フジホーム株式会社**

〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15
 ヒューリック八丁堀ビル7F
 TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632
 URL:www.fujihome.co.jp





- 棒状のステッキは、ステッキなしで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう、補助的に使用するものです。体重を掛け過ぎると、かえって肩や手を痛めることもある為、次の場合は使用に適しません。
(また、次のような状態になった場合は使用を中止してください。)
- ①ステッキなしでは歩行できない方の使用
(手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。)
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。(ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。)

サイズ：
約66.5cm～89.0cm伸縮

取扱説明書

品番：WB3750
 商品名：アクティブグレース伸縮S桜ピンク
 サイズ：約66.5cm～89.0cm伸縮
 10段階調節2.5cmピッチ
 材質：グリップ/ポリプロピレン、
 エラストマー
 シャフト/アルミニウム
 ストラップ/ナイロン
 先ゴム/合成ゴム
 重量：約250g
 使用先ゴム：16mm用
 生産国：台湾

S Gマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

- !** この度は、当社商品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。
! ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、使用方法を理解された上で正しく使用してください。
 ●お読みになった後はいつでもご覧頂けるように商品タグと一緒に大切に保管してください。


ステッキの長さ調節の目安

ステッキの長さ調節

ステッキの先をつま先から20cm前方に置いて、ひじを140～150度に曲げた時が最適な高さです。


ステッキの長さの目安

(身長÷2)+3cm
 端数は切り上げ
 【例】
 身長が160cmなら、
 83cmとなります。

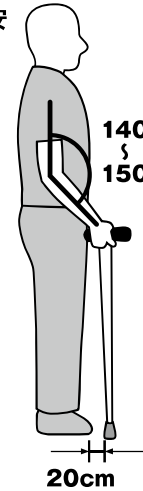

長さ調節方法


1. シャフトロックを回してゆるめてください。
 2. ストッパーを押しながらシャフトをスライドさせ、長さを調節します。
 3. シャフトをスライドする場合、上部シャフトから下部シャフトが抜けないようにしてください。
- !** シャフトロック内の樹脂部品(オリング)が外れると、確実に固定できない場合があります。
4. 長さを調節後、ストッパーがサイズ調節穴に確実に入っていることを確認してください。
 5. シャフトロックを回して締め、確実に固定してください。

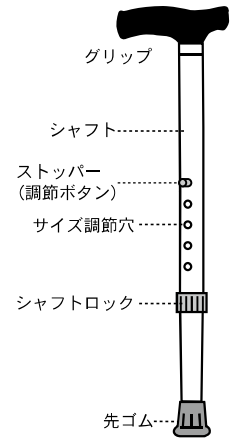

●安全上のご注意・・・ステッキ本来の使い方をしてください！

1. 長さ調節方法をよくお読みになり、正しく理解した上でご使用ください。
2. 身体に合った長さに調節してご使用ください。不適切な長さで使用すると事故などの原因となり、危険です。
また、シャフトが確実に固定されたことを確認してご使用ください。
3. ご使用前には必ず各部の点検をしてください。万一、本体のキズ、先ゴムの異常などを見つけた時は、ご使用をおやめください。
4. 使用後は、シャフトの水分や汚れを拭き取り、内部を乾燥させてください。
(そのまま放置すると内側が錆びやすくなります)。
5. 使用後は屋内に保管してください。その際、高温・多湿の場所には置かないでください。
6. 柔らかな地面や、雪道、滑りやすい所では使用しないでください。また段差にもご注意ください。
7. 道路の側溝の溝や凹みがある所では、つえ先がはまり込む場合がありますので、充分ご注意ください。
8. グリップ先端に過大な力をかけるような使い方はしないでください。
9. 用途以外(例えば、登山用、護身用等)には使用しないでください。
10. 先ゴムが摩耗したり、破れた場合は速やかに取り替えてください。取り替えの際は、シャフトの先端が完全にゴムの中に入るまで、確実に挿入してください。中途半端な取り付けは危険です。

グリップの握り方

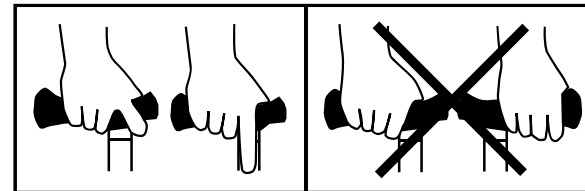

! ご使用前に、シャフトのサイズ調節穴からストッパー(調節ボタン)が確実に
! 出ている事をご確認下さい。

発売元 **フジホーム株式会社**

〒104-0033 東京都中央区新川2-12-15
 ヒューリック八丁堀ビル7F
 TEL.03-3523-1631 FAX.03-3523-1632
 URL:www.fujihome.co.jp

