


⚠ 使用上のご注意

内容をご確認頂き、杖(ステッキ)本来のご使用をお願いいたします

1. 身体にあった杖(ステッキ)をお選びください。不適切な長さのまま使用すると、事故等の原因となり危険です。
2. ご使用前には必ず各部の点検をしてください。万一、シャフト(杖本体)に破損、長さ調節ボタン、振れ止めネジの不具合等を見つけた際は、直ちにご使用を中止してください。また、杖先の摩耗・破損等の異状がある場合はすみやかに交換してください。
*本製品専用品をご使用ください。
3. 杖先がシャフト(杖本体)に確実に固定されていることを確認してからご使用ください。
*杖先を外したままのご使用はお止めください。
4. 使用中もゆるみ等の異状がないか確認してください。
5. 上シャフトから下シャフトを完全に引き出さないようにしてください。振れ止めネジ内部のリングが外れる場合があります。
6. 長さ調節ボタンが確実に固定されたことを確認してご使用ください。
7. 過大な力をかけないでください。(ステッキは歩行の補助用品です。全体重を支えることはできません。)
8. 柔らかな地面・雪路・濡れたり凍結した路面等、滑りやすい場所や不安定な場所でのご使用は危険です。また、道路の側溝等の溝やくぼみのある場所では、杖先がはまり込む恐れがありますのでご注意ください。
9. 水平面以外の使用では、杖先が不安定になります。また、杖先の破損の原因となりますので、ご注意ください。
10. 杖先を踏んでしまうと転倒してケガをする恐れがあります。ご注意ください。
11. 用途以外(登山・護身用等)には使用しないでください。
12. お子様が遊び道具にしないようご注意ください。
13. ご使用後は水分・汚れをきれいに拭き取り、屋内に保管してください。高温・多湿な場所(ストーブのそば、夏場の自動車内での放置等)は、杖先が劣化する場合がありますのでお避けください。また、低温の場所(寒冷地等)では、杖先が硬化し滑りやすくなる場合があるため十分ご注意ください。

〈輸入・販売元〉

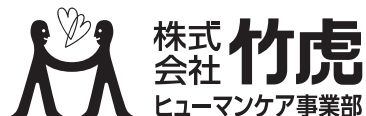

商品に関するお問い合わせ
受付時間/平日9:00~17:00 無料通話 **0120-798-777**
URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

AG-06

ヒューゴステッキオフセット多点杖

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます

この杖は、“杖なしで自立歩行できる方”がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。以下のような症状の方、またはこのような症状になった方は、ご使用をお止めください。

- 杖なしでは歩行が困難な方(歩行に手すりや介護者を必要とする方を含む)
- リハビリ中の方(医師の指導のもとで使用する方を除く)


*本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前に必ずこの『取扱説明書』をお読みください。

*内容をご理解頂き、記載の危険・注意事項をお守りください。

*この『取扱説明書』は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

正しい長さの選び方

杖先を、足先の前方20cmに置き、肘の角度が30~40度になる長さが、正しく使いやすい長さです。

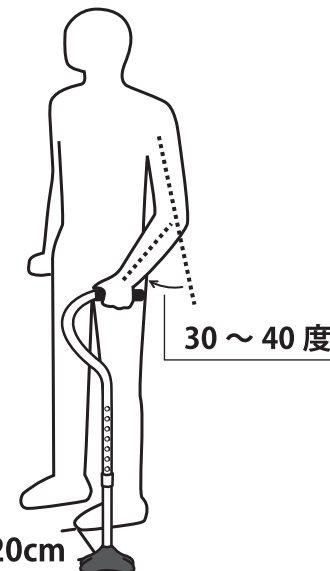


注意

ハイキング・登山等には
使用しないでください。

前方外側 20cm


各部名称

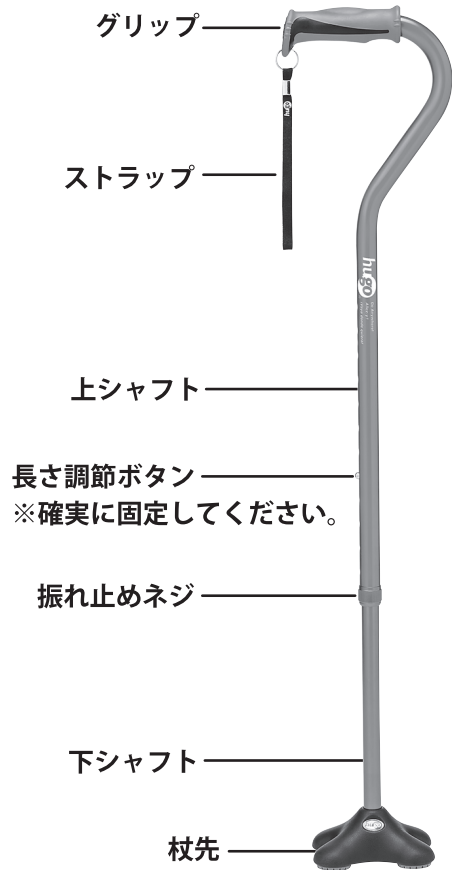


長さ調節ボタン
※確実に固定してください。

【サイズ】Φ19/22×H710～990mm(12段階)
杖先：W102mm×D124mm
【重量】約560g
【材質】本体：アルミニウム
握り手：TPR、PP
ストラップ：ナイロン
杖先：プラスチック、アルミニウム

グリップの正しい握り方

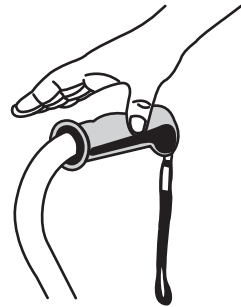


グリップに真上から手を乗せます。

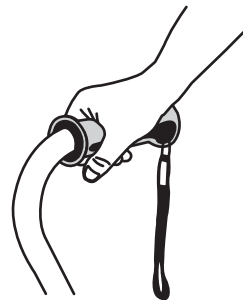

グリップ全体を包むように握ります。


⚠ 注意

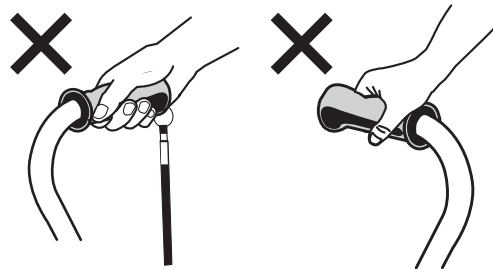


グリップの一部分だけを握ったり、反対に握ったりすると、荷重が偏りシャフトが折れたり、転倒する危険があります。思わぬ事故の原因となる恐れもありますので、絶対にお止めください。

長さの調節方法


1. 振れ止めネジを時計まわりに回し、ゆるめます。

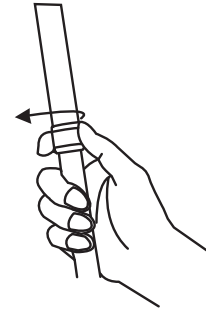


2. 長さ調節ボタンを指で押しながら下シャフトを伸縮させて、長さを調節してください。

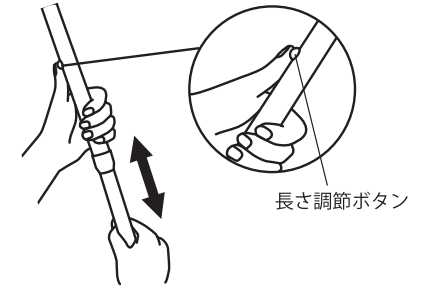

3. 長さ調節ボタンが“カチッ”と音がしたことを確かめてください。

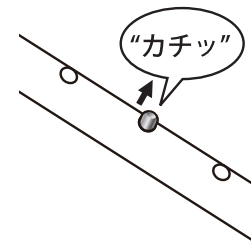

4. 振れ止めネジを反時計まわりに回して締め付けてください。

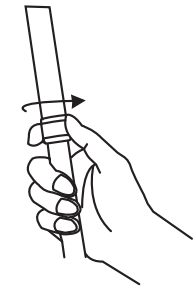

⚠ 注意


“長さ調節ボタン” および“振れ止めネジ” はご本人または介護者の方が確実に固定されているか必ず確かめてください。固定されていないと事故やケガの原因になり危険です。

杖先付け外し方法

※4mm 径の六角レンチをご用意ください

【外す】

杖先の底中央にある取付ネジを六角レンチで反時計回りで回します。

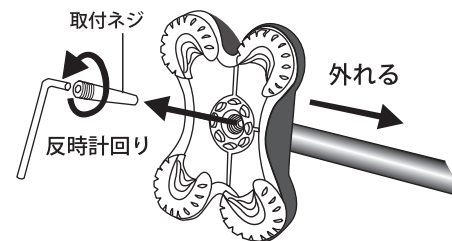

【付ける】

シャフトを差し込み、取付ネジを杖先の底中央のネジ穴に入れて時計回りで回します。

