


# 座いす型リフトアップチェア800

## 取扱説明書・保証書

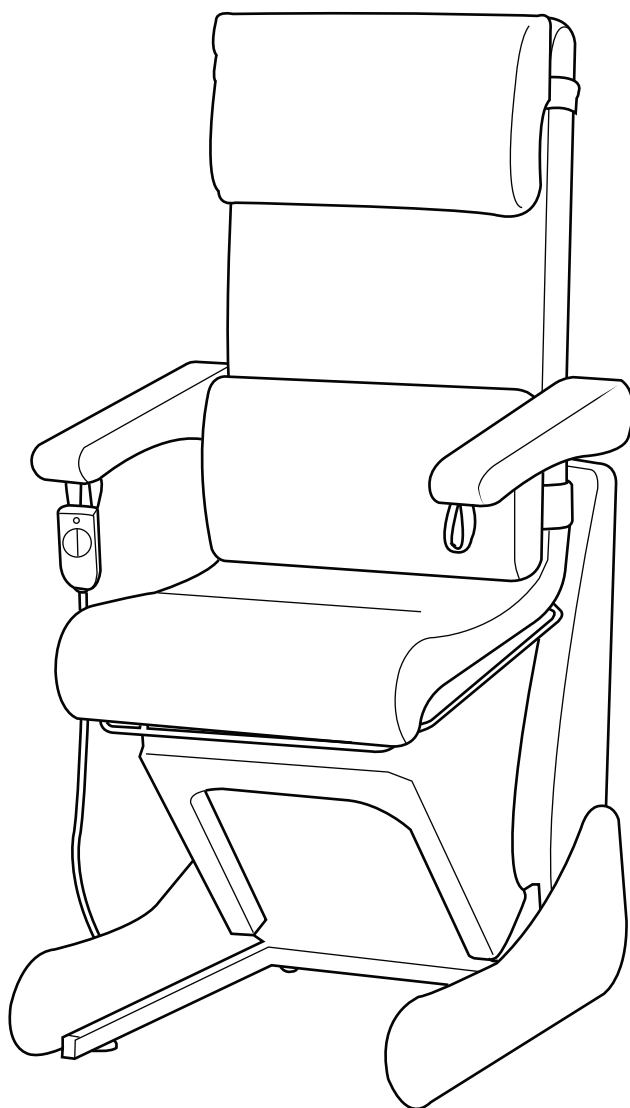

### はじめに

- この度は、『座いす型リフトアップチェア800』をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
- この商品を安全に正しくお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みにになり、十分に理解してください。
- お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。

### 目次

|                |    |
|----------------|----|
| 安全上のご注意        | 3  |
| 使用上のご注意        | 5  |
| 各部のなまえとはたらき    | 6  |
| バッテリーの取り付け方    | 7  |
| バッテリーの充電の仕方    | 8  |
| バッテリーパックの取扱説明書 | 9  |
| 使いかた           | 10 |
| お手入れと保管        | 11 |
| 故障かなと思ったら      | 11 |
| 仕様             | 11 |
| 保証とアフターサービス    | 12 |



# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

|                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いを<br>すると、人が死亡または重<br>傷を負う可能性が想定<br>される内容を示します。                                    | <b>図記号の説明</b>                                                                                                                                           |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いを<br>すると、人が <sup>※1</sup> 傷害を負ったり、<br><sup>※2</sup> 物的損害の発生が<br>想定される内容を示<br>します。 |  <b>禁止</b><br>●は、禁止(してはいけないこと)を示します。<br>具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。 |
|                                                                                             |                                                                                          |  <b>強制</b><br>●は、強制(必ずすること)を示します。<br>具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。    |
|                                                                                             |                                                                                          |  <b>注意</b><br>△は、注意を示します。<br>具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。            |

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。

※2 物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

## 警告

|                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>強制</b> | 動かなくなったり、水に濡れた場合、異常がある場合はすぐに電源プラグを抜くこと<br>漏電やショートなどによる火災・感電の恐れがあります。お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。                                             |  <b>分解禁止</b> | 分解・改造・修理をしないこと<br>火災・感電・けがの原因となります。                                                        |
|  <b>強制</b> | 座を昇降させるときは、背もたれ部・座部・肘掛部の間に手や腕や脚を挟まないようにすること<br>けがの原因となります。                                                                                |  <b>禁止</b>   | 電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと<br>感電・ショート・発火の原因になります。                            |
|  <b>禁止</b> | 電源コードを傷めないこと<br>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理やりに曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、座いすでつぶしたり、重いものを載せたりしないこと また、移動中は挟み込んだりしないこと<br>電源コードが破損し、火災の原因となります。 |  <b>強制</b>   | 座を昇降させるときは安全バーの隙間や座の下に足や手を入れないようにすること、駆動部の下に子供や動物がいらないこと、及び物が無いことを確認すること<br>けが・事故の原因となります。 |
|  <b>強制</b> | 座を昇降させている時に前後左右から圧力をかけないで下さい。<br>転倒するおそれがあります。                                                                                            |  <b>禁止</b>   | 100V以外では使用しないこと<br>火災・感電の原因となります。                                                          |

## ⚠ 警告

|                                                                                         |                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <br>禁止 | 子供を座いすの上や下で遊ばせないこと<br>けがや故障の原因になります。                                        | 浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しないこと<br>感電・火災・故障の原因になります。                 |
|                                                                                         | 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないこと、また幼児を近づけないこと<br>感電、けがの原因になります。            | 電源コードやリモコン用コードはいすの下や背の間などを通さないこと<br>断線、故障の原因になります。            |
|                                                                                         | リモコン操作が困難な人の使用は避けること。また、介護を要する人が利用する場合は、必ず介護をする人の監督下で使用する<br>けがや事故の原因になります。 | 製品の上に、危険なものや重いものを置かないこと<br>置いたものが落下し、けがや製品・家財を破損する原因になります。    |
|                                                                                         | 電源コードの配線は、通路を避けること<br>コードにつまづいて転倒したり、破損や断線の原因になります。                         | 製品の作動時は、周囲に人や障害物がないことを確認すること<br>正常に動作しなかったり、けがや破損・故障の原因となります。 |
|                                                                                         | 暖房器具や、放熱機器の近くには設置しないこと<br>火災や変色の原因となり大変危険です。                                | 張り地や安全カバーを無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしないこと<br>けがや故障の原因になります。   |

## ⚠ 注意

|                                                                                                  |                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br>プラグを抜く     | 停電のときは直ちに電源プラグをコンセントから抜くこと<br>再通電されたときに事故の原因になります。     | 座いすを移動させる際は、必ずコードを抜くこと。<br>またコード類をキャストで踏まないこと。<br>けがや断線、故障の原因になります。 |
| <br>プラグを持って抜く | ご使用後は電源プラグをコンセントから抜くこと<br>絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。 | お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと<br>感電やけがをすることがあります。                        |
| <br>強制        | 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込むこと<br>感電・ショート・発火の恐れがあります。        | 運搬の際は2人以上で行い、静かに設置すること<br>破損や傷の原因になります。                             |
|                                                                                                  | 電源コードに脚を引っ掛けないように気を付けること<br>けがの原因になります。                | 木床や畳など凹んだり傷つきやすい床面の上に設置する際は、カーペットなどを敷くこと<br>床面に傷がつきます。              |
| <br>禁止        | 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、リモコンを操作しないこと<br>感電や故障・誤作動の原因になります。  | 平坦でない・水平でない場所で使用しないこと<br>故障や事故の原因になります。                             |
|                                                                                                  | 転倒しやすい物や窓の近くに座いすを設置しないこと<br>家財を傷めたり、けがの原因になります。        | 座いすを倒したり強い衝撃を与えないこと<br>けがや故障の原因になります。                               |
|                                                                                                  | 電源プラグにピンやゴミを付着させないこと<br>感電・ショート・発火の原因になります。            | 座いすや機械に水をかけないこと<br>感電や故障の原因になります。                                   |
|                                                                                                  | 脚部の間に枕などを置かないこと<br>座を昇降するときに挟み込まれ故障の原因になります。           | 座いすに複数人で乗らないこと<br>けがや故障の原因になります。                                    |
|                                                                                                  | 木床や畳など傷つきやすい床面で引きずって移動させないこと<br>床面に傷がつきます。             | 人や物を乗せて移動しないこと<br>けがや故障の原因になります。                                    |
|                                                                                                  | ベンジン・シンナー等で拭いたり、殺虫剤を掛けないこと<br>感電・引火の原因になります。           | 背もたれ部や肘掛部には乗らないこと<br>けがや故障の原因になります。                                 |

# 使用上のご注意



電動昇降座いすを使用する際は、故障及びけがの原因となる下記のような使用をお止め下さい。

1. 肘掛けなど座面以外に座ったり、座面の上に立ったり、耐荷重 (90kg) 以上の荷重を掛けしないで下さい。





2. 座いすに勢いをつけて座ったり、飛び乗ったりしないでください。

また肘掛けの一方に寄りかかって体重を掛ける等、不安定な体勢で作動させないで下さい。

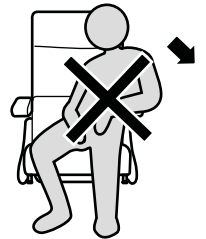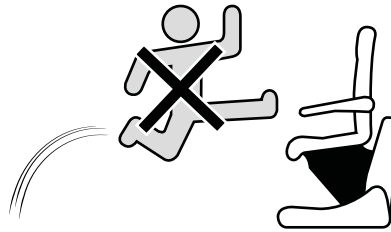

3. 座いすをひっくり返したり、落下させる等、大きな衝撃を与えないで下さい。

座椅子を持ち上げて運ぶ際は、必ず2人以上で移動させて下さい。

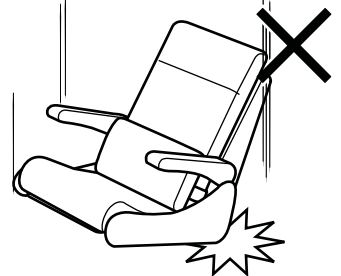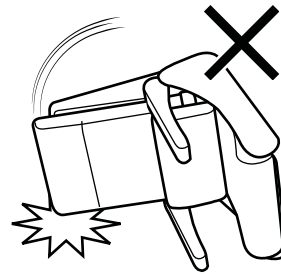


4. 子供だけで操作したり、作動中に近づけないようにして下さい。

座の下に手足や物を入れないで下さい。

けがや事故の原因となります。


安全バーの隙間に指や物を入れないで下さい。

安全装置が正しく働かず事故の原因になります。

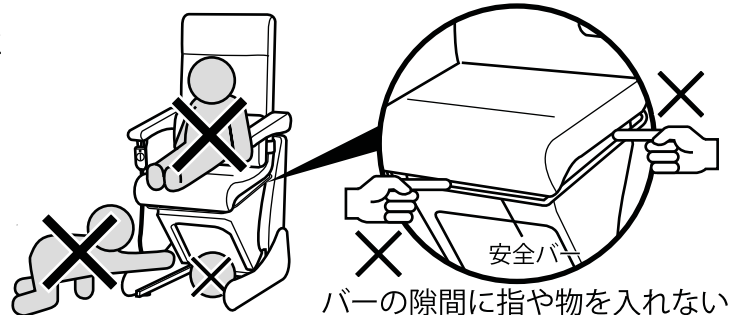


5. 電源コードやリモコン用コードは座面の下や脚の下を通さないで下さい。

絡まって断線や故障の原因となります。

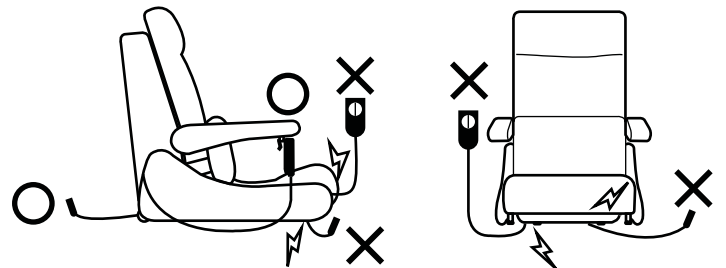

6. 使用中、座いすの駆動部 (右図のグレー部分) には絶対触れないで下さい。

駆動部を覆っている安全カバーは手や脚等を挟む事を防ぐための手段のひとつとして取り付けられている物です。絶対に外さないで下さい。

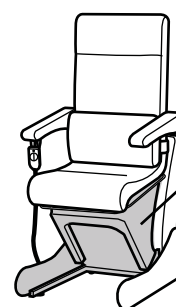


この灰色部分に触れない事



# 各部のなまえとはたらき

## 座いす本体

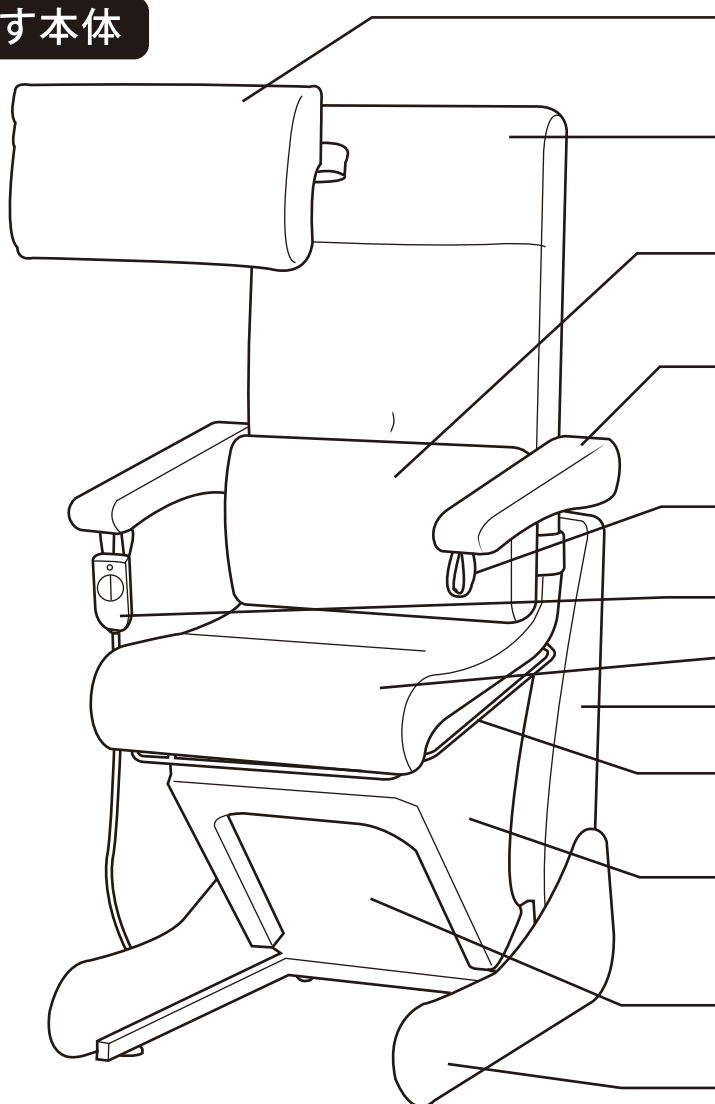

### 背枕

マジックテープ式なので簡単に位置調節・取り外しが可能です。

### 背もたれ

### 腰クッション

マジックテープ式なので簡単に取り外すことができます。

### 肘掛け

跳ね上げることが可能で、座椅子からの出入りがしやすくなっています。

### リモコンかけ

肘掛けの左右に備えられています。

### リモコン

### 座面部

### 本体

### 安全バー

座の昇降時に手足や物を挟まないよう、この部分に異物が触れると作動を停止します。

### 安全カバー


駆動部に異物を巻き込まないように、伸縮性の高い布地で覆っています。

### 駆動部

使用中に手や物を入れないようにしてください。

### 脚部

## 背面部

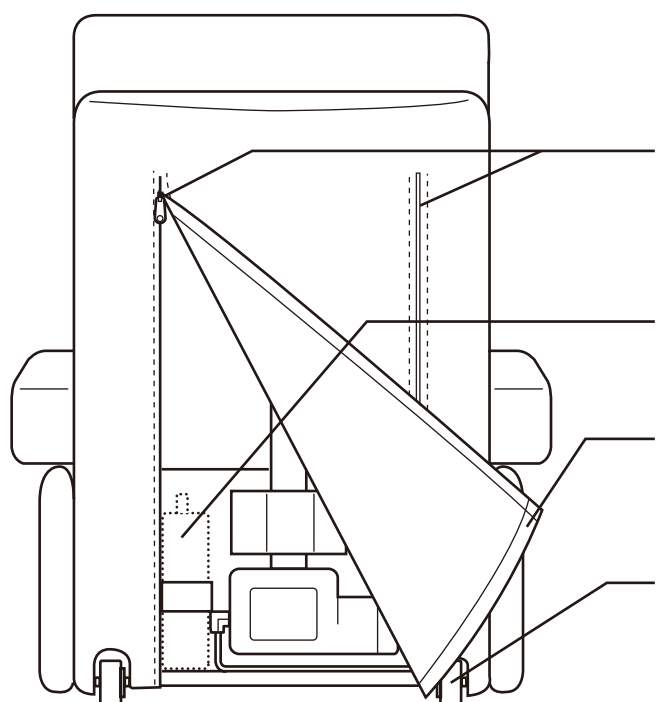

### ファスナー

バッテリーの充電、取り外し、交換の時以外はあける必要はありません。

### バッテリー取り付け位置


この部分にバッテリーを取り付けます。

### マジックテープ

### キャスター

本体を傾けるとキャスターが接地します。移動に便利です。

## ⚠ 注意

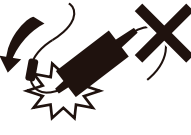- ① トランス・電源プラグは濡れた手で抜き差ししないで下さい。
- ② トランスを湿気のある所に置いたり水で濡らしたりしないで下さい。
- ③ コード部に脚が絡まないよう注意して下さい。転倒の恐れがあります。
- ④ トランスを落としたり、上に物を置いたりして衝撃を与えないようにして下さい。
- ⑤ 電源プラグにほこりがたまると火災の原因となりますので注意して下さい。
- ⑥ トランスは使用中熱くなる事がありますが異常ではありません。

## 【バッテリーの取り付け方】

- ① 以下の部品が揃っていることを確認してください。



ブラケット×1




M5×30ネジ×2




M5ナット×2

- ② 右図のように、ブラケットをバッテリーにあてがい、付属のネジとナットで確実に固定してください。

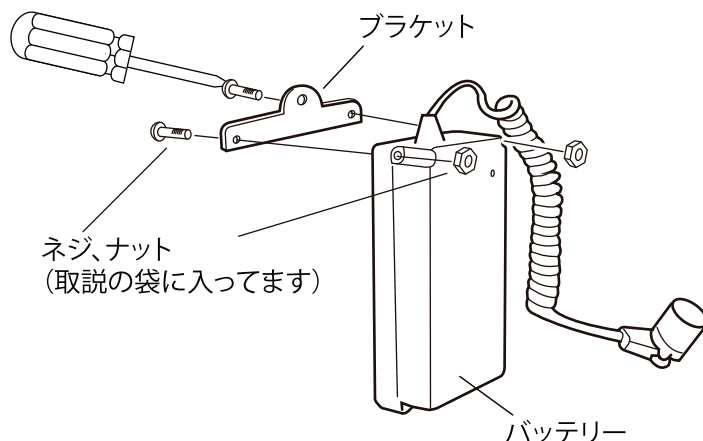


- ③ 本体の背面にあるファスナーを開けてください。

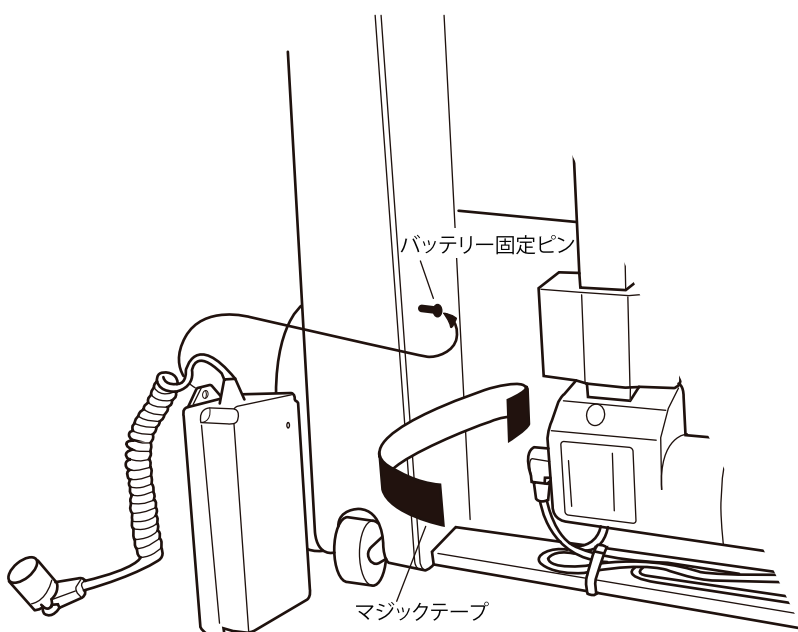

- ④ 左側にあるバッテリー固定ピンとマジックテープの位置を確認してください。


- ⑤ ブラケットの穴をバッテリー固定ピンに引っ掛け、マジックテープでしっかりと固定してください。

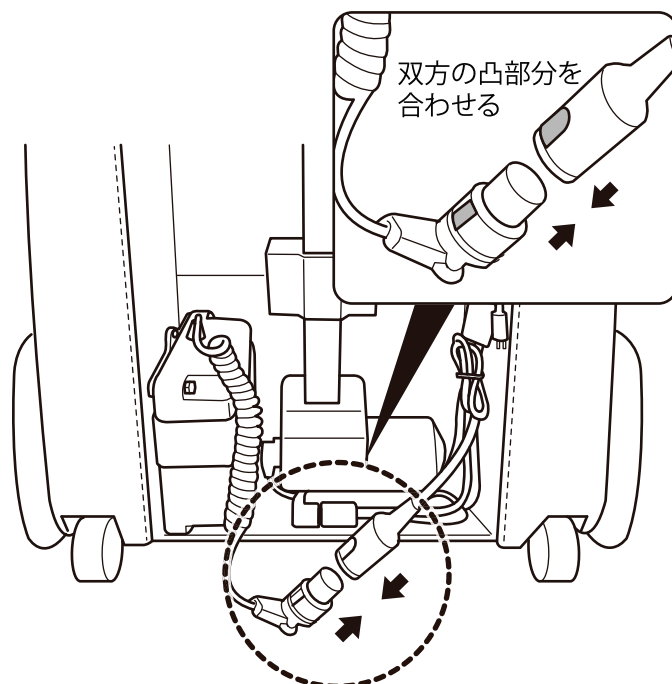

- ⑥ 上図のように、プラグを接続します。プラグ双方の凸部分を合わせてから差し込んでください。

- ⑦ バッテリーをフル充電してください。(P.8参照)


# バッテリーの充電の仕方

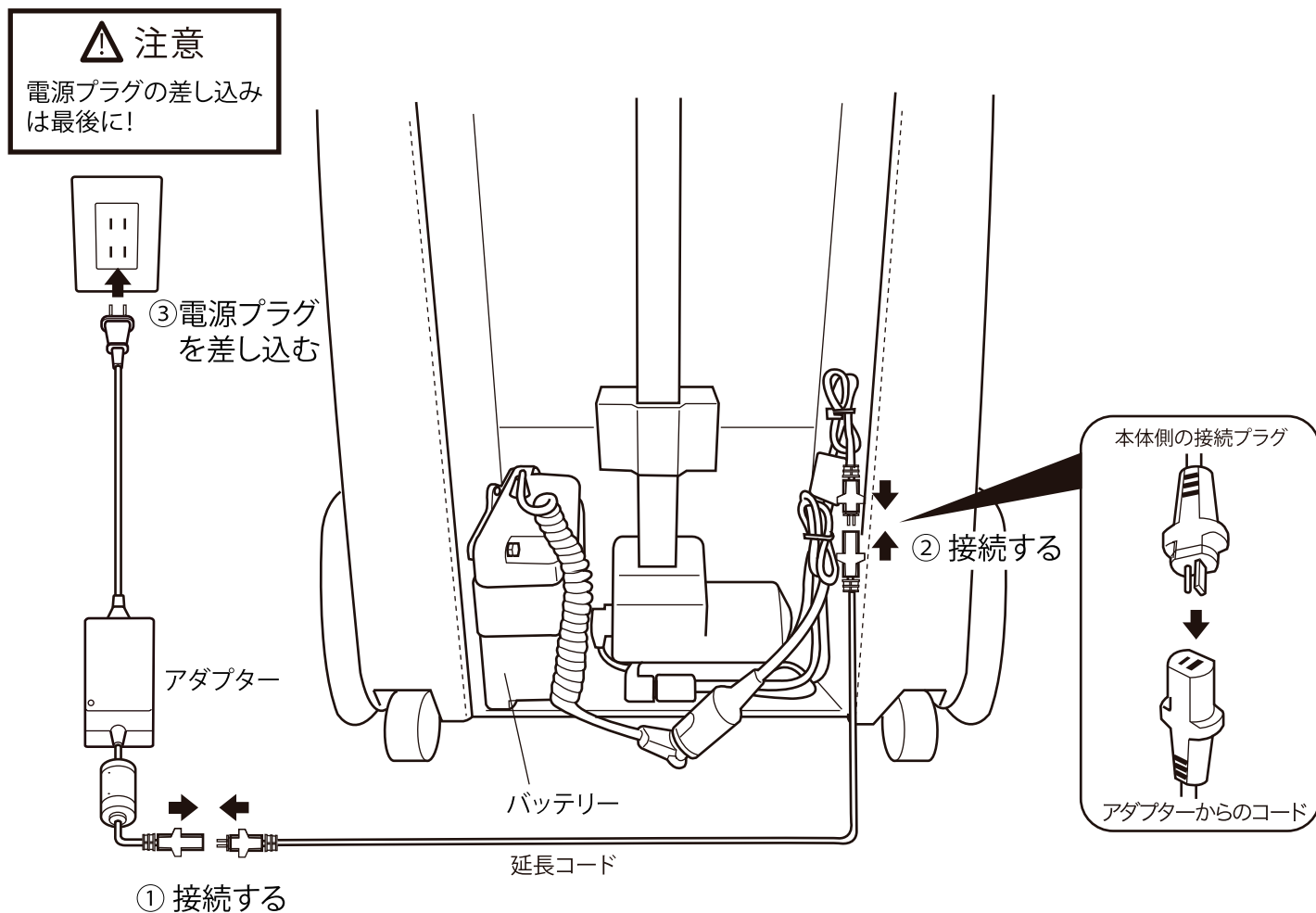

## ⚠ 注意

- ご使用前に必ずフル充電してください。
- 接続は①→②の順番で行い、③の電源プラグは最後に差し込んでください。
- 電源プラグや接続プラグを抜くときは、必ずプラグ部分をもって引き抜いてください。

# バッテリーパックの取扱説明書

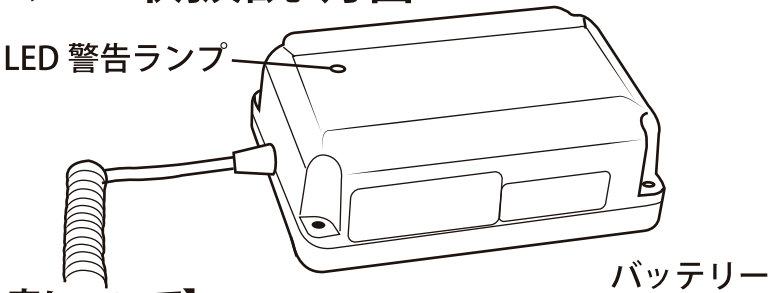

## 【LED警告ランプ、警告音について】

| LED の色 | LED の表示   | 警告音     | 残量       | その時の状態   |
|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 緑      | 点滅（4 秒置き） | なし      | 25%-100% | 使用可      |
| オレンジ   | 点滅（4 秒置き） | ピピピピ    | 25%未満    | 充電してください |
| -      | 消灯        | ピピピピ    | 20%未満    | 充電してください |
| 緑      | 点滅（1 秒置き） | ピーピー    | -        | 充電開始     |
| 緑      | 連続点灯      | ピー（5 秒） | 100%     | 充電完了     |

## 【バッテリーを長持ちさせるために】

- 開梱直後、使用前に24時間以上の充電を行ってください。
- 当バッテリーの特徴として、作動しなくてもバッテリーの残量は減少します。  
旅行等で、長時間で使用にならないときは、お出かけの前に24時間以上の充電を行ってください。
- 約3週間以上作動を行わなかったときは、ご使用前に24時間以上の充電を行ってください。
- およそ一か月以上放置すると、バッテリー残量がゼロになり、バッテリーの寿命、充電容量を低下させるだけでなく、バッテリーが使用できなくなる可能性がありますので十分ご注意ください。

## 【バッテリー交換の目安】

- 1回の充電で作動回数が著しく少なくなった時がバッテリーの交換時期です。(充電回数目安：250回)  
(寒冷地ではバッテリー性能が低下する場合があります)
- バッテリーの交換は、当製品取扱店までご相談ください(交換は有料です)

## 【使用済みバッテリーは】

地方自治体、もしくはリサイクル業者にご相談ください。

## 【保証期間：お届け日より1年間】

### バッテリー仕様

|          |              |
|----------|--------------|
| 定格出力電圧   | DC24V        |
| 容 量      | 1.2Ah        |
| 重 量      | 1.5kg        |
| 使用環境温度   | 0℃～ 40℃      |
| サイズ      | 175×116×60mm |
| バッテリーの種類 | 鉛蓄電池         |
| 充電回数目安   | 250 回        |
| 充電時間     | 約 12 時間      |

### こんな時は


|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>●バッテリーを手で触れないほど熱い</li><li>●異臭や煙が出ている</li><li>●充電を始めても緑色点滅しない</li></ul> |
| ただちに使用を中止し、当製品取扱店までご連絡ください。                                                                                  |

# 使いかた

## 座るとき

座りやすい高さまで座面の高さを調節します

- 1 座りやすい高さまで座面を上げる。
- リモコンの上昇ボタンを押し、座りやすい高さまで座面を上げておきます。
  - 座面はボタンから指を離せば止まります。

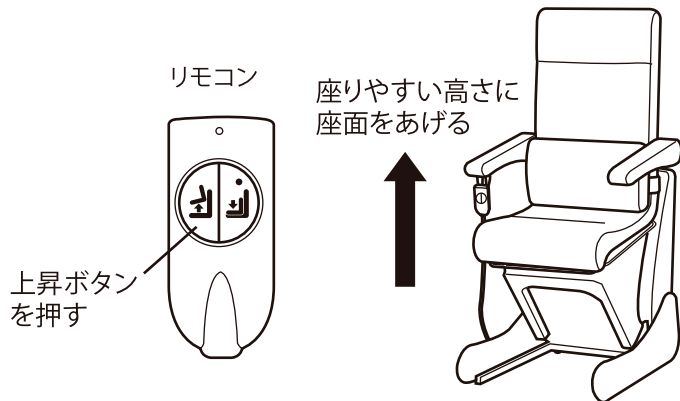

- 2 腰を下ろす。
- 肘掛けに手をかけて腰を下ろします。
  - 膝や腰を曲げてかがみ込む事なく着座する事が出来ます。



- 3 お好みの高さまで下降させる
- リモコンの下降ボタンを押し、お好みの高さで止めて下さい。
  - 座面はボタンから指を離せば止まります。
  - 座面は一番下まで下がると自動的に止まります。



## ⚠ 注意

- 座面に深く腰掛けてください。
  - 座面の前端部に浅く腰掛けしないでください。
  - 安全バーの間に指や物を入れないで下さい。
  - 座面の片側だけに体重をかけないで下さい。
  - 袖に全体重をかけないで下さい。
- バランスを崩して滑り落ちたり、けがや転倒するおそれがあります。

## 回転機能

(電源コードの巻き込み注意!)

- 座面を最も下降させた状態では回転機能が働き、座ったまま回転させる事が可能です。
- テーブルからの出入りがスムーズです。
- 座面をあげた状態ではストッパー機能が働き、回転しません。(安全機能)



## ⚠ 注意

電源コードが接続されている状態で回転させるとコードが本体に絡んだり、断線、破損の原因となるので十分注意してください。



## 立つとき

立ちやすい高さまで座面の高さを調節します

- 1 両側の肘掛けを下ろす。  
●転倒防止のため、座いす椅子を上昇させる前に両側の肘掛けを下ろしておきます。



足をテーブルに挟まないよう、十分なスペースがある事を確認して下さい

- 2 リモコンの上昇ボタンを押す。  
●リモコンの上昇ボタンを押し続け、立ちやすい高さまで上昇させて下さい。  
ボタンから指を離れたところで止まります。



- 3 肘掛けに手を添えて立ち上がる。  
●肘掛けに手を添えると、楽に立ち上がる事が出来ます。



## ⚠ 注意

- 脚をテーブルにはさまないように、上昇させるときは座いすとテーブルの間に十分なスペースがあることを確認してください。
- 座面の端に座って上昇させないで下さい。
- 肘掛けに全体重をかけないで下さい。
- 肘掛けの可動部に指や物を入れないで下さい。  
バランスを崩して滑り落ちたり、けがや転倒するおそれがあります。

## 移動

- 1 電源プラグをコンセントから抜く。  
●抜いた電源コードが本体に絡んだり引きずったりしないようにして下さい。
- 2 座面を一番下まで下げておく。  
●リモコンの下降ボタンを押し、一番下まで下がっていることを確認してください。
- 3 背に手をかけゆっくり傾け移動する。  
●本体背面部にあるキャスターが接地するように傾けて下から支えるように持ちます。  
キャスターが接地している事を確認し、背を下から支えるようにしてゆっくりと移動させて下さい。

## ⚠ 注意

- 移動中に手を離さないで下さい。
- ゆっくりと移動させて下さい。
- 段差や急な斜面の移動は避けて下さい。
- 座面に物を置かないでください。  
座いすの転倒により、けがや破損の恐れがあります。



# お手入れと保管

## お手入れ方法

- ファブリックのお手入れは、布の目に沿ってブラシをかけながら軽く叩いてホコリを浮かせた後、掃除機で吸い取って下さい。粘着式のクリーナーを使用すると、繊維の表面を傷める事がありますのでお避け下さい。
- ジュースなどの液体をこぼしたときは、直ちに薄めた中性洗剤を軽く絞ったタオル等で軽くたたくように吸い取ってください。擦ると汚れを広げてしまう原因となります。その後、風通しのいい場所で乾かしてください。

|                                                                                             |                                              |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと<br>感電やけがをすることがあります。 | <br>プラグを抜く |
|                                                                                             | ベンジン・シンナー等で拭いたり、殺虫剤をかけないこと<br>感電・引火の原因になります。 | <br>禁 止    |

## 保管

- 汚れやほこりをとった後、湿気の少ない所に保管してください。(カビやシミの原因になります。)
- 直射日光が当たる所、ストーブなどの近くで直接高温になる所はさけてください。

|                                                                                             |                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | <b>分解・改造・修理をしないこと<br/>火災・感電・けがの原因になります。</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 故障かなと思ったら

※修理サービスを依頼する前に以下の点をご確認下さい。

| こんなときは        | 調べること                                        | 対策                                                  |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ボタン押しても動かない   | ●電源プラグが抜けていませんか<br>●安全装置に物が触れていませんか          | →電源プラグをしっかりと差し込む<br>→安全装置に触れている異物を取り除く              |
| リモコンが正常に動作しない | ●ケーブルは接続されていますか<br>●電源の状態等により誤作動している可能性があります | →ケーブルをしっかりと差し込む<br>→電源プラグをコンセントから一度抜き、もう一度差し込んで下さい。 |

それでも問題が解決されない場合は、『保証とアフターサービス』の項をご参照下さい。

## 仕様

MADE IN CHINA

|           |      |                  |          |                                                           |
|-----------|------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 品 名       |      | 電動起立補助座いす        | サイズ (cm) | 座いすとして使用時<br>幅60×奥行81×高さ78cm<br>最大上昇時<br>幅60×奥行81×高さ124cm |
| 形 名       |      | 座いす型リフトアップチェア800 |          |                                                           |
| 定 格       | 電 源  | AC100V 50-60Hz   |          |                                                           |
|           | 消費電力 | 60W              | 本体重量     | 約34kg                                                     |
| 耐荷重量      |      | 90kg             | フレーム素材   | スチール                                                      |
| リモコン用コード  |      | 約1m              | 外装張り地    | 平織布                                                       |
| 電 源 コ ー ド |      | 約4m              | 昇降速度     | 18mm/秒                                                    |
| 使 用 人 員   |      | 1人               | バッテリー    | 24V 1.2A                                                  |

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 修理・お取り扱いについて

修理やお取り扱い・お手入れに関するご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

## 保証書

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお届け日から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

## 修理を依頼されるときは

電源を切り、使用を中止し必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■保証期間中は……………

保証書の規定に従って修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、販売店に保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎているときは……………

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ■修理料金のしくみ……………

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 修理料金は技術量・部品代などで構成されています。 |                                        |
| 技術料                      | 故障した商品を正常に修復するための料金です。                 |
| 部品代                      | 修理に使用した部品代金です。                         |
| 出張料<br>配送料               | 商品のある場所へ技術者を派遣、または商品の引き取りと再配送にかかる料金です。 |

|      |         |       |   |   |
|------|---------|-------|---|---|
| 便利メモ | お買い上げ日  | 年     | 月 | 日 |
|      | お買い上げ店名 | 電話( ) | - |   |

このような  
症状はあり  
ませんか。

- こげくさい時がある。
- モーターの異常音がある。
- 動作しないときがある。

ご使用中  
止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

**FranceBed**

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148



**0120 - 39 - 2824**

フリーダイヤル:月～金 9時～12時、13時～17時  
(※土、日、祝祭日、年末、年始等は除く)

## 修理メモ

# 保証書

お届け日 平成 年 月 日

お客様  
ご芳名 様  
ご住所 〒 -  
TEL

販売店  
店名・住所

保証期間：お届け日より1年

## 保証の適用除外

保証期間中でも次のような場合には、有料修理又は出張料を申し受ける事があります。

- (1) 本保証書のご提示が無かった場合。
- (2) 本保証書にお届け日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。
- (3) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
- (4) 誤った使用あるいはお取扱上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- (5) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造、改造された場合。
- (6) ご購入後の移動や輸送及び落下等、不適切なお取扱により故障及び損傷が生じた場合。
- (7) 火災、地震、風水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障又は損傷が生じた場合。
- (8) 指定電源(AC100V 50Hz/60Hz)以外の使用、及び異常電圧による故障又は損傷が生じた場合。
- (9) 本製品の使用による経年変化に該当する事項、及び消耗品の交換。
  - ①布地、革、ソフトレザー等の破損、変色。
  - ②木部の変質、塗装・メッキ部の曇り変色。
  - ③電球の切れ。
- (10) 一般家庭用以外（例 業務用等）に使用された場合の故障及び破損。
- (11) 設置場所（床面のゆがみ等）に起因される異音、組立不具合。
- (12) 本製品外より発生した食虫害。

## 設置場所

- (1) ご贈答品、あるいは転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書記載のお客様相談室へご相談下さい。
- (2) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in japan.

## 法的責任

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権限を規制するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にお問い合わせ下さい。

## 保証の態様

- (1) 保証期間内において、取扱説明書、製品添付の注意ラベル等の注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無償修理致します。
- (2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にご連絡下さい。
- (3) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に要する実費を申し受けることがあります。

## 保証を受けるための条件

保証を受けるためには、出張修理の際に本保証書及び販売店納品書又は領収書を提示して下さい。

※ご注意 納品書又は領収書を併せて保管願います。

## 保証の対象

消耗部品を除く、本体とし保証期間は別表によります。尚、別売部品をご選択の場合は、別売部品添付の保証書によります。

## 免責

本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

## 販売店様へのお願い

ご販売又はご配送時に保証書の所定事項（お届け日、販売店名）をご記入の上、お客様へお渡し下さい。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148  
TEL 042(543)3111（代表）



**FranceBed**